

Primary Cosmic Rays





Telescopio per la misura della direzione di arrivo dei raggi cosmici secondari

*Dott.ssa Roberta Pillera
Poliba - INFN Bari*


Sommario

- I raggi cosmici secondari a livello del mare
 - Distribuzione angolare
- L'apparato sperimentale
 - Descrizione generale
 - Gli scintillatori
 - I fotomoltiplicatori
 - La movimentazione
- Il sistema di acquisizione
 - Il pannello di controllo
 - Le misure in tempo reale
 - La distribuzione delle direzioni di arrivo

Distribuzione angolare dei raggi cosmici

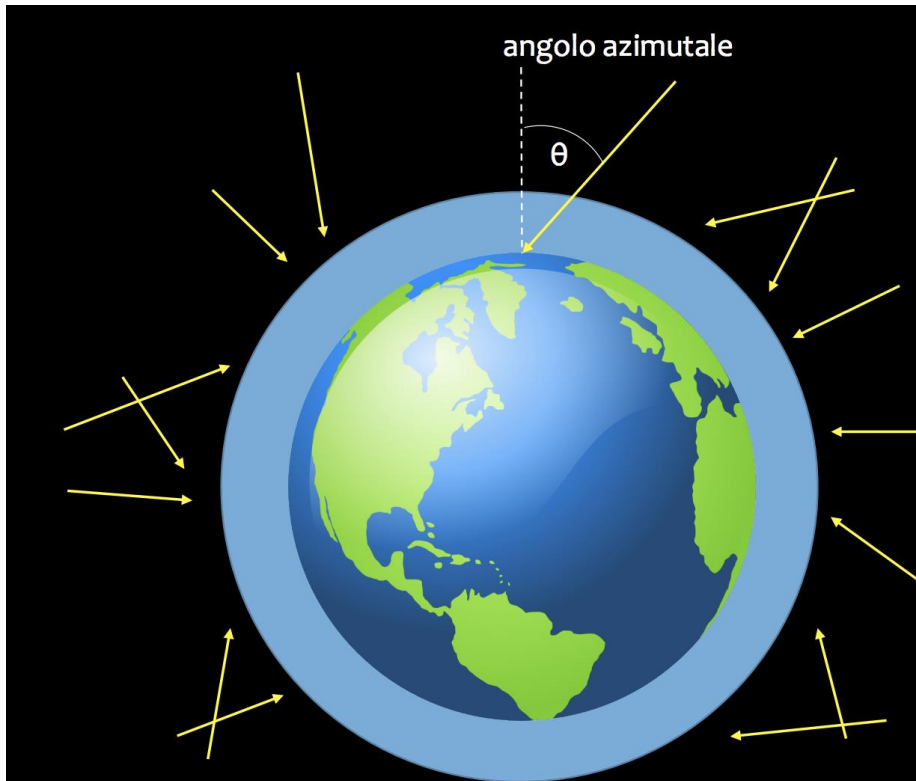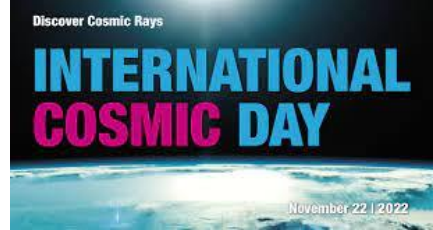


- I raggi cosmici **primari** sono isotropi
- I raggi cosmici **secondari** seguono la distribuzione $\cos^2 \theta$

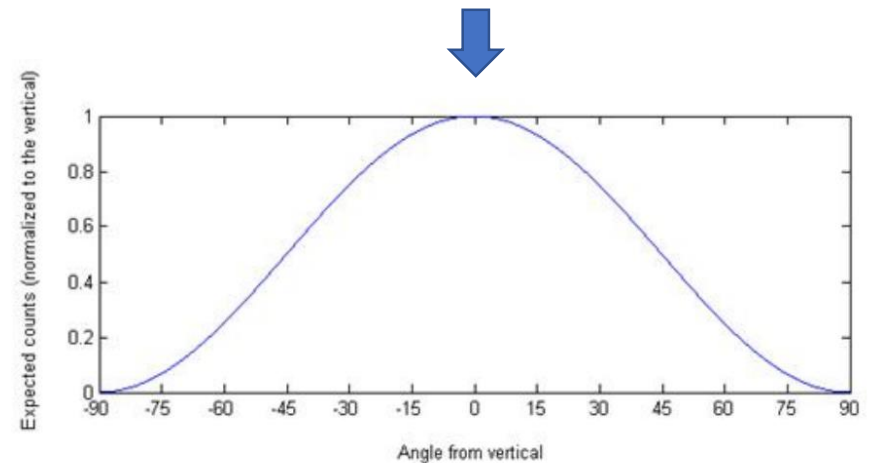

L'apparato sperimentale

Descrizione generale

- L'apparato di rivelazione di particelle cariche che avete di fronte è stato realizzato nell'ambito del progetto lauree scientifiche con il contributo del Dipartimento di Fisica e della Sezione INFN di Bari
- E' stato progettato e realizzato per poter studiare la direzione di arrivo dei raggi cosmici secondari a livello del mare

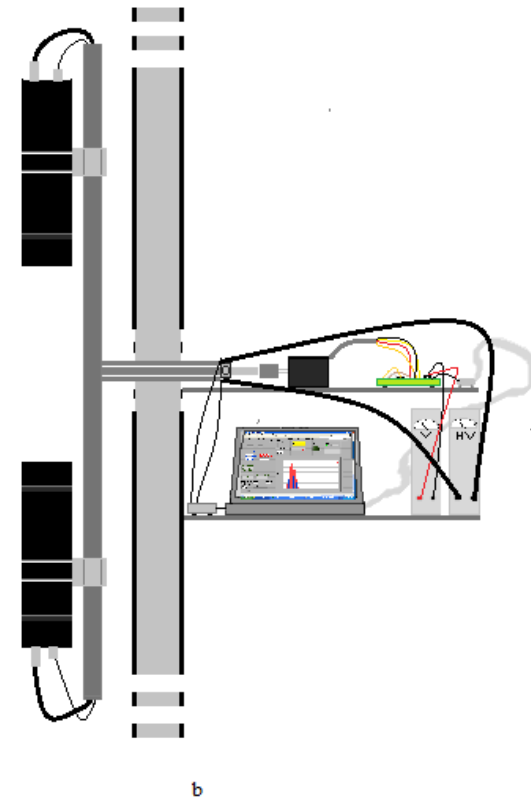

L'apparato sperimentale


Gli scintillatori

- Gli scintillatori possono essere usati per la rivelazione di particelle cariche di alta energia
- Quando uno scintillatore viene attraversato da una particella emette un debole lampo luce
- La luce viene convogliata, per mezzo delle guide di luce, al fotocatodo del fotomoltiplicatore per poter essere osservata



L'apparato sperimentale I fotomoltiplicatori


- La luce prodotta dagli scintillatori viene «guidata» verso il fotocatodo del fotomoltiplicatore per essere rilevata
- I fotoni incidenti sul fotocatodo, per effetto fotoelettrico, inducono l'emissione di fotoelettroni
- Tali fotoelettroni, vengono accelerati dalla differenza di potenziale (d.d.p.) che c'è fra il fotocatodo e il primo dinodo;
- Ogni fotoelettrone, accelerato dalla d.d.p. acquista energia che indurrà l'estrazione di altri elettroni dal primo dinodo
- Gli elettroni secondari, a loro volta, verranno accelerati dalla d.d.p. fra i dinodi, e quindi ognuno di essi estrarrà elettroni dai dinodi successive

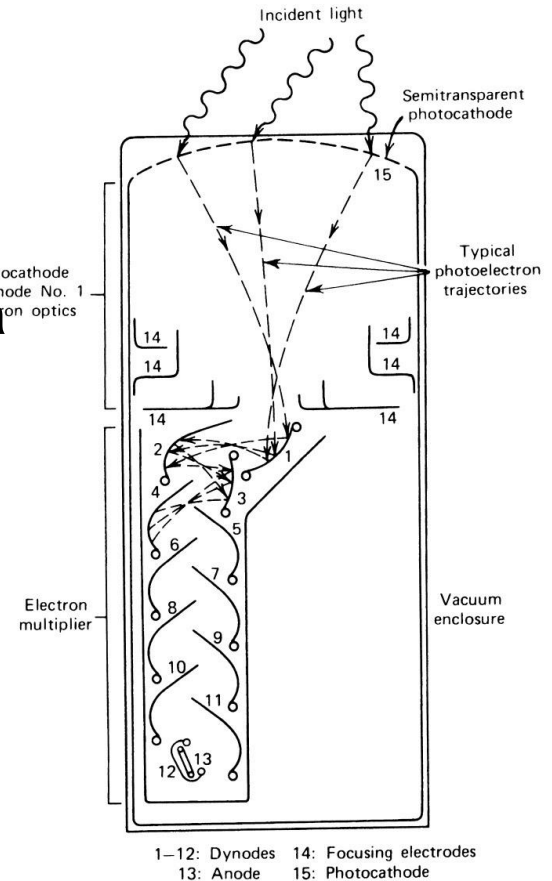

L'apparato sperimentale

La movimentazione


- Il motore utilizzato per muovere il telescopio è un PH 266M E1.2 passo - passo unipolare
- E' utilizzato in modalità «two-phases on»
- Il sistema di controllo del motore utilizza un generatore di segnali digitali comandato da un software sviluppato in ambiente LabView

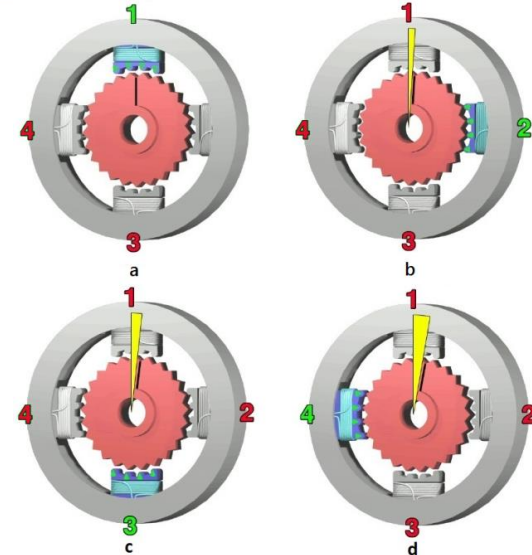

Il sistema di acquisizione Il pannello di controllo



- Il sistema di controllo e acquisizione è interamente sviluppato in ambiente LabView
- Il pannello di controllo permette agevolmente di impostare i parametri della acquisizione e di osservare in tempo reale l'andamento della misura

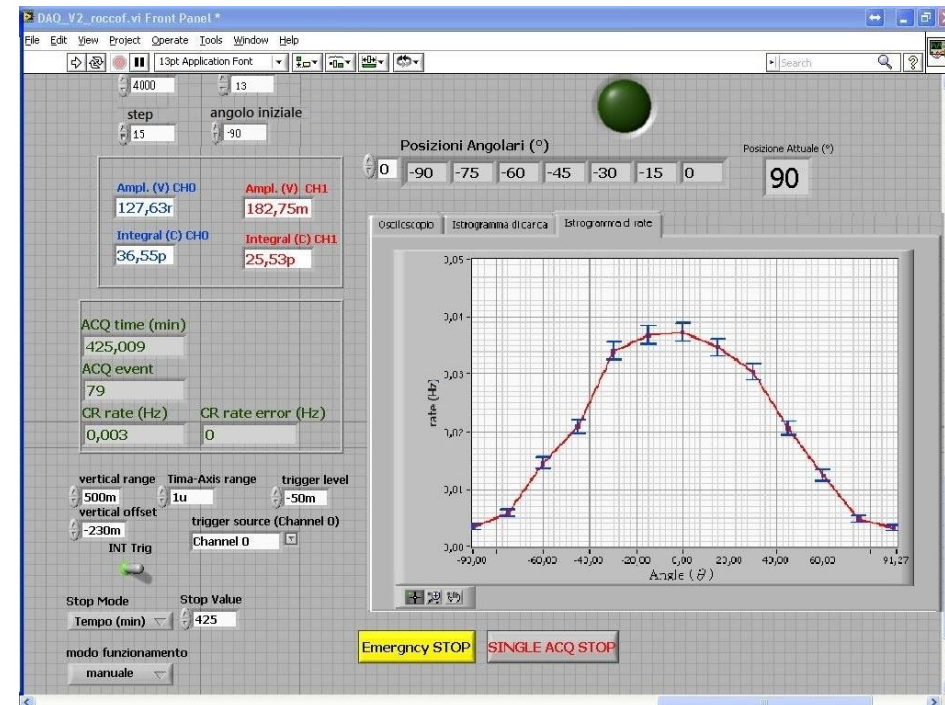



Il sistema di acquisizione

Le misure in tempo reale



Attraverso la parte di programma dedicato all'acquisizione dei segnali è possibile eseguire le seguenti misure:

- Visualizzare la forma dei segnali generati dai fotomoltiplicatori sullo schermo del PC
- Integrare il segnale acquisito per determinare la carica raccolta sull'anodo del fotomoltiplicatore
- Costruire un istogramma della carica raccolta dall'anodo nel corso di un intero ciclo di acquisizione
- Costruire l'istogramma del rate di arrivo dei μ in funzione dell'angolo rispetto all'Azimut.

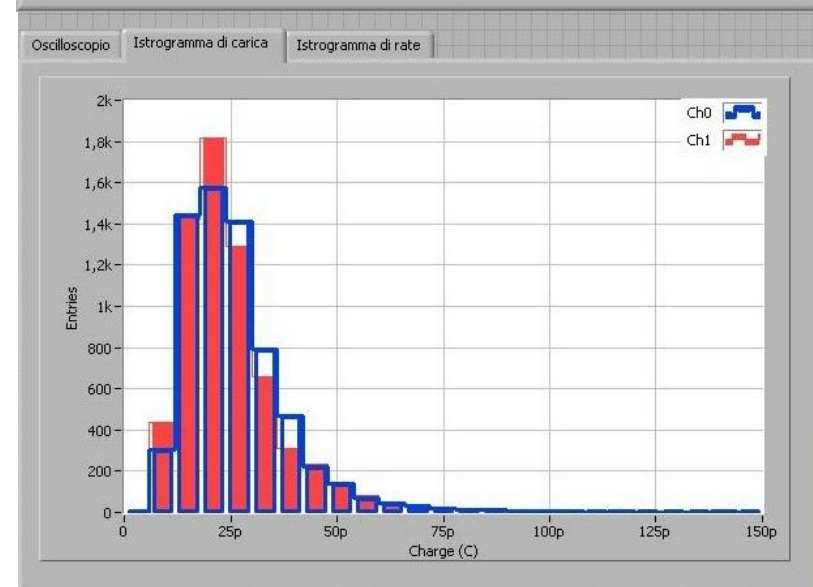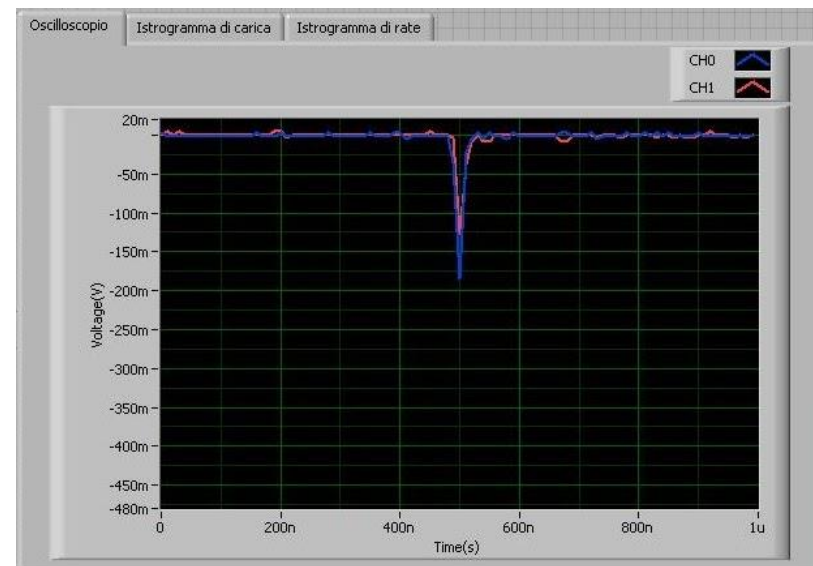

Ringraziamenti

L'apparato sperimentale è stato realizzato dal

Dott. R. Luisi

sotto la supervisione dei:

Dott. F. Gargano

Dott. F. Giordano

Dott. V. Paticchio

nell'ambito del progetto «Lauree Scientifiche» del **Corso di Laurea in Fisica dell'Università degli Studi Bari «Aldo Moro»**

Si ringrazia la **Sezione di Bari dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare** per il supporto

Si ringraziano inoltre per il supporto tecnico i Sig.ri

Pasquale Cariola

Giuseppe De Carne

Domenico Dell'Olio

Francesco Maiorano

Gaetano Tamma

