
## Pompe SCROLL


07.11.2024 MANUTENZIONE BASE POMPE SCROLL

MECCANICA STILL COMPONENTI MECCANICI Speciali

## ALL'APERTURA DELLA POMPA, ALL'ARRIVO PRESSO NS. LABORATORIO:

POMPA SROLL PRESENTA SPORCIZIA VARIA DOVUTA ALL'USURA DELLE TIP SEAL CHE HANNO LAVORATO OLTRE I 2 ANNI CONSIGLIATI DA CASA MADRE. (LA DURATA DELLE TIP SEAL E' IN OGNI CASO CONDIZIONATA DAL LAVORO DI POMPAGGIO – SE IN PRESSIONE O IN PRESENZA DI GAS CORROSIVI.) – UN SEGNALE D'ALLARME E' IL CALO DELL'EFFICIENZA DI POMPAGGIO

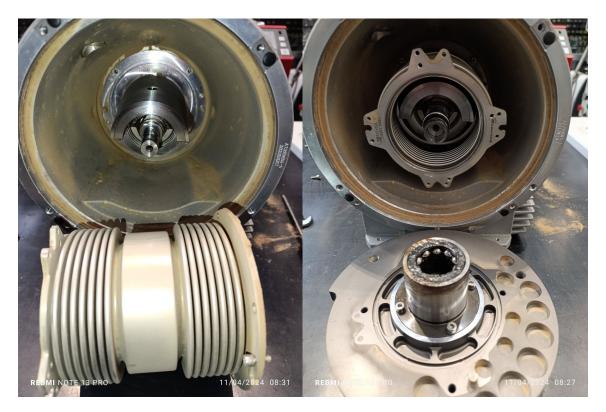

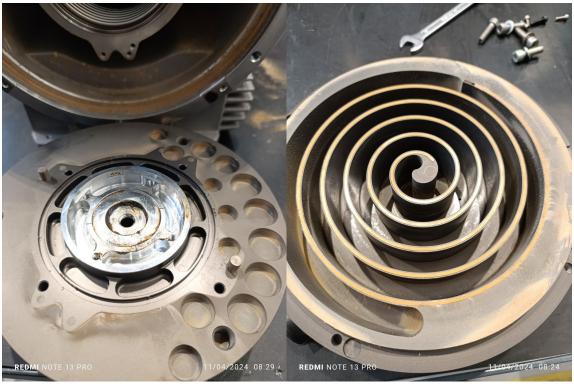

POMPE SCROLL 2

## A SEGUITO PULIZIA INTERNA NECESSARIA PER LA PREPARAZIONE DELLA SCROLL AL CAMBIO DELLE TIP SEAL:



ORA SI PUO' PROCEDERE AL CAMBIO DELLE TIP SEAL SECONDO PROCEDURA

POMPE SCROLL 3